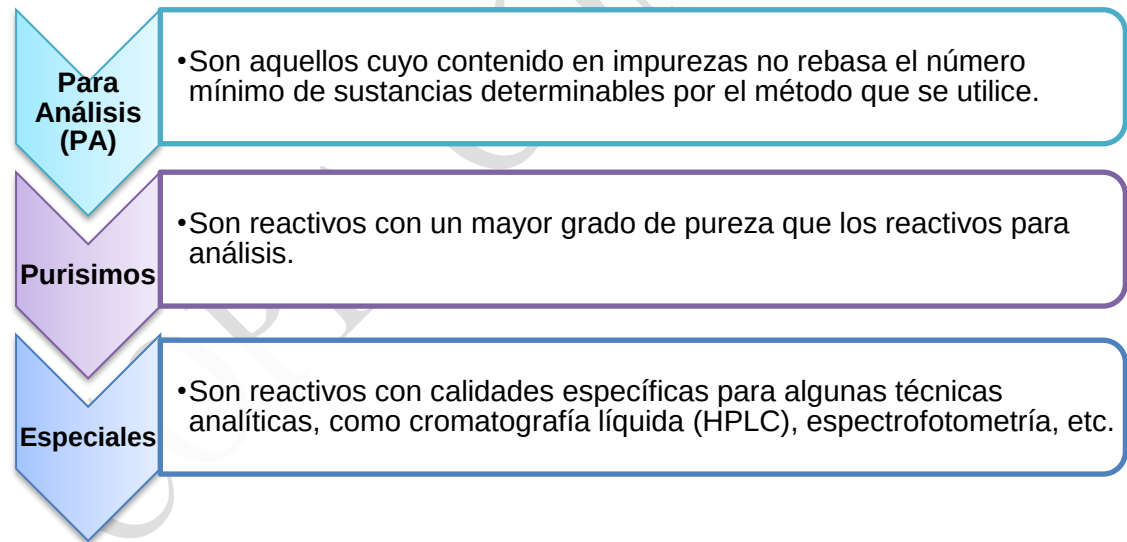


	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MR-17
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 08
		FECHA: septiembre 2024
		Página: 1 de 45

Contenido

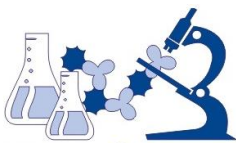
1. OBJETIVO	4
1.1 Objetivos Específicos	4
2. ALCANCE	5
3. RESPONSABILIDAD	5
5. DEFINICIONES	6
6. CONTENIDO	¡Error! Marcador no definido.
7. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO	10
7.2 Clasificación por Categorías	10
En Colombia la clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario: Categoría III (alto riesgo), Categoría II (mediano riesgo) y Categoría I (bajo riesgo). Decreto 3770 de 2004. Artículo 3°.	
	10
	¡Error! Marcador no definido.
5.2 Codigos Nacionales De Incendio - NFPA 704	¡Error! Marcador no definido.
7.3 Clasificación De Los Reactivos Según Uso	13



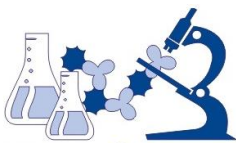
	13
8. VIGILANCIA PROACTIVA	13
1.2 Aspectos A Evaluar En La Adquisición De Reactivos Diagnostico <i>Invitro</i> .	14

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

1.2.1	Información Del Proveedor	14
1.2.2	Registro Sanitario INVIMA	15
1.2.3	En la Recepción de reactivos de diagnósticos INVITRO.....	15
1.3	Aspectos Del Almacenamiento De Reactivos.	18
1.3.1	Semaforización Para El Manejo De Las Fechas De Expiración En Los Reactivos.....	19
1.4	Aspectos de Trazabilidad De Los Reactivos	20
1.5	Aspectos de la Frecuencia de solicitud de reactivos	20
1.6	Aspectos de la Disposición De Final de Reactivos.....	20
1.6.1	Criterios Para Desechar Los Reactivos.....	20
2.	VIGILANCIA REACTIVA	21
2.1	Efectos Indeseados Con Reactivos De Diagnóstico In Vitro.....	21
2.2	Reporte de incidentes y eventos adversos.....	22
2.3	Referente de Reactivovigilancia	23
2.4	Funciones Del Responsable De Programa De Reactivo vigilancia	24
2.5	Tipos De Reporte.....	24
2.5.1	Reporte inmediato.....	24
2.5.2	Reporte Periódico.....	25
2.6	Como Reportar?	26
2.7	A Quien Se Reporta?.....	27
2.8	Formatos De Reporte.....	28
2.8.1	Formato de Reporte Trimestral.....	28
2.8.2	Formato De Reporte Invima Eventos Adversos RDIV	29
2.9	Comité Para El Analisis De Casos Notificados	31
2.10	Gestión De Los Reportes Por Parte Del Invima	31
3.	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA.....	32
3.1	Adaptar e implementar el Programa de Reactivo vigilancia	32
3.2	Sistemas de informacion y comite	32
3.3	Capacitacion continuada.....	33
3.4	Vigilancia Proactiva y Reactiva	33
3.5	Seguimiento a las Alertas	33

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

4. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.....	34
ANEXO 1. FLUJOGRAMAS MANEJO DE REACTIVOS Y REACTIVOVIGILANCIA.....	35
6.1 REACTIVOVIGILANCIA.....	36
ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA PROACTIVA	36
REPORTES.....	36
Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro.....	37
FALLAS POTENCIALES	39
8.2 FARMACOVIGILANCIA.....	¡Error! Marcador no definido.
FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO	¡Error! Marcador no definido.
REPORTES FARMACOVIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
3.2 TECNOVIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
DISPOSITIVOS MEDICOS OBJETO DE VIGILANCIA.....	¡Error! Marcador no definido.
REPORTES.....	¡Error! Marcador no definido.
17. NORMAS DE SEGURIDAD	¡Error! Marcador no definido.
18. BIBLIOGRAFIA.....	42
9. REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES	43

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Colombia impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente.¹

Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesario la participación responsable de los diversos actores involucrados. La Seguridad del Paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad necesarias.¹

El Laboratorio Clínico Especializado Martha Cecilia Perdomo IPS, en su desarrollo de la Política de Seguridad del Paciente, crea el presente manual para dar cumplimiento a la implementación del programa de Reactivovigilancia, definiendo un documento institucional para la identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos relacionados con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro, la gestión de los efectos indeseados, y la implementación de las acciones preventivas o correctivas según sea el caso.¹

implementa el Programa de Reactivovigilancia con el cual se proyecta garantizar la inocuidad de los reactivos de diagnóstico in vitro.

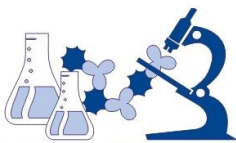
Por lo tanto, la Alta de Dirección del LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS en representación de su directora MARTHA CECILIA PERDOMO CABRERA, identificado con CC No 34530326, se compromete con la gestión de los recursos necesarios para la implementación del Programa de Reactivo Vigilancia en el Laboratorio Clínico.



Martha Cecilia Perdomo Cabrera

Directora

¹ LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Bogotá, 11 de junio de 2008

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

1. INTRODUCCIÓN

El programa de reactivovigilancia tiene como fin la identificación y la clasificación de efectos indeseados ocasionados por algún tipo de defecto en los reactivos de diagnóstico in vitro así como la caracterización de los factores de riesgo que puedan estar relacionados con estos, permite determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de la aparición de problemas relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro para prevenir la aparición de estos mediante notificación, registro y evaluación de problemas.

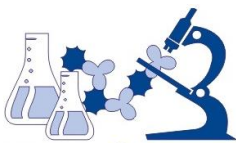
El programa de reactivovigilancia a través de este manual, nos permitirá llevar a cabo las actividades encaminadas a vigilar y controlar los reactivos de diagnóstico in vitro de acuerdo con el riesgo sanitarios que se presenten por defectos en la calidad o por el manejo inadecuado de estos, lo que incide de modo directo en la seguridad del paciente y en el personal manipula los reactivos, por lo cual en su implementación se debe tener en cuenta la reglamentación emitida a nivel nacional.

2. OBJETIVO

- Realizar actividades encaminadas a desarrollar, mantener y fortalecer el programa de vigilancia post comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro usados en el Laboratorio Clínico Especializado.

2.1 Objetivos Específicos

- Generar los mecanismos para recolectar, evaluar y gestionar información sobre incidentes adversos o riesgos de incidentes adversos asociados a Reactivos de Diagnostico IN VITRO en el Laboratorio Clínico.
- Detectar oportunamente los Reactivos de Diagnostico IN VITRO comercializados en el territorio nacional que generen riesgo de incidentes adversos.
- Adoptar medidas para la prevención de incidentes con Reactivos de Diagnostico IN VITRO
- Implementar medidas de control y seguimiento a los casos detectados.
- Orientar al personal del Laboratorio en los conocimientos y herramientas necesarias para la realización de los reportes de incidentes adversos a dispositivos médicos.
- Establecer la semaforización del uso de los reactivos utilizados.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

3. ALCANCE

El alcance de este manual incluye desde la adquisición, la identificación, registro, notificación hasta el control del riesgo detectado con los reactivos in vitro utilizados en la prestación del servicio del Laboratorio Clínico Especializado Martha Cecilia Perdomo IPS

4. RESPONSABILIDAD

Todo el personal del laboratorio, deberá reportar en el formato de reporte de incidentes, eventos y no conformes CA.FR-26, cada que identifiquen o tengan conocimiento de que un reactivo, causó o es sospechoso de causar un evento o incidente adverso, para ser analizado por comité de seguridad el paciente; De la misma manera se realiza la designación del referente por parte de la dirección del programa.

5. MARCO NORMATIVO

DECRETO 3770 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2004	"Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano".
RESOLUCIÓN 1036 DE 2018	"Por el cual se establecen los requisitos que se deben cumplir para la importación y comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, los reactivos de uso general en laboratorio y reactivos in vitro en investigación utilizados en muestras de origen humano"
RESOLUCIÓN 132 DEL 23 DE ENERO DE 2006	"Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico In Vitro".
RESOLUCIÓN 3100 DE 2019	"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
RESOLUCIÓN 2020007532 de 2020	"Por la cual se modifica el Programa Nacional de Reactivovigilancia"

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

6. DEFINICIONES

Acción Correctiva. Es aquella emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

Acción Preventiva. Es aquella tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Buenas prácticas de manufactura de reactivos de diagnóstico in vitro: Es el conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos cuya aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de los reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos legalmente exigibles para su comercialización.

Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA): Es el documento que emite el Invima, en el que se certifica el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad por parte del establecimiento que almacene y/o acondicione los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta certificación tendrá una vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia y control por parte del Invima.

Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Reactivos de Diagnóstico in vitro (BPM): Es el documento expedido por el Invima en el cual se certifica que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta certificación tendrá una vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia y control por parte del Invima.

Concepto técnico de las condiciones sanitarias: Es el documento expedido por el Invima, en el que consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación, de recursos humanos y de control de calidad que garantizan el buen funcionamiento del establecimiento fabricante, así como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran, el cual regirá hasta tanto se certifique el Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Reactivos de Diagnóstico In Vitro (BPM).

Defectos de Calidad. Cualquier característica física o química del reactivo de diagnóstico *in vitro*, que no corresponda a las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante y con las que fue autorizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en el registro sanitario, o que impida que el reactivo cumpla de manera segura y efectiva con el uso previsto.

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Efecto Indeseado. Acontecimiento relacionado con la atención recibida por un paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas, derivadas del uso de un reactivo de diagnóstico *in vitro*.

Envase primario: Es aquel recipiente o elemento en contacto directo con el sistema de envase que estando en unión con el contenido, lo protege de la contaminación y cambios físicos durante su vida útil.

Envase secundario: Es el recipiente o elemento del sistema de empaque, que contiene en su interior al envase primario y lo protege de la contaminación y cambios físicos durante su transporte y almacenamiento.

Equipo para diagnóstico: Instrumentos, equipos o aparatos, mecánicos, eléctricos, electrónicos o lógicos (hardware o software) utilizados, entre otros, con fines de diagnóstico químico, biológico, inmunológico, que permiten la lectura objetiva de las muestras y el adecuado registro de soporte.

Formato de Reporte. Instrumento mediante el cual un reportante notifica a la entidad sanitaria, a su propia institución y/o al fabricante, sobre un efecto indeseado asociado a un reactivo de diagnóstico *in vitro*.

Inserto: Es cualquier material impreso o gráfico que acompañe al reactivo de diagnóstico *in vitro*, el cual contiene instrucciones generales de uso, almacenamiento, componentes, precauciones y toda la información necesaria para el uso seguro y adecuado del reactivo.

Programa Institucional de Reactivovigilancia. Conjunto de mecanismos que deben implementar internamente en los diferentes actores de los niveles departamental, distrital y local, para el desarrollo del programa nacional de Reactivovigilancia.

Riesgo. Probabilidad de que un efecto indeseado ocurra.

Red de Reactivovigilancia. Estrategia nacional de comunicación voluntaria y de trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la Reactivovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o nacional.

Reportes Inmediatos de Reactivovigilancia. Reportes de Reactivovigilancia que reporta un efecto indeseado con un reactivo de diagnóstico *in vitro*.

Reportes Periódicos de Reactivovigilancia. Corresponde al consolidado de reportes de incidentes adversos acumulados en cada trimestre del año.

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con:

1. Un estado fisiológico o patológico.
2. Una anomalía congénita.
3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales.
4. La Supervisión de medidas terapéuticas.

Reactivo de diagnóstico in vitro alterado: Se entiende que un producto o reactivo de diagnóstico in vitro se encuentra alterado cuando:

1. Se haya sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado, los elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o cuando se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar sus efectos o características físico-químicas.
2. Presente transformaciones en sus características físico-químicas, microbiológicas o funcionales.
3. El contenido no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original total o parcialmente.
4. De acuerdo con su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones.

Reactivo de diagnóstico in vitro fraudulento: Se entiende por producto o reactivo de diagnóstico In Vitro fraudulento cuando:

1. Fuere elaborado por un laboratorio o establecimiento que fabrique, almacene o acondicione y no cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) de acuerdo con las disposiciones vigentes o que no las estén implementando de acuerdo con el plan gradual señalado en el presente decreto.
2. No provenga del titular de los registros sanitarios de que trata el presente decreto, del laboratorio o establecimiento fabricante o del importador, o del distribuidor, o del que almacene o acondicione que se encuentren autorizados por la autoridad sanitaria competente.
3. Utilice envase o empaque diferente al autorizado.
4. Fuere introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en este decreto.
5. La marca presente apariencia o características generales de un producto legítimo y oficialmente aprobado, sin serlo.
6. No esté amparado con registro sanitario.

Reactivo de diagnóstico huérfano: Son los reactivos de diagnóstico in vitro potenciales, en los cuales no existe un interés de comercialización por parte de los laboratorios productores, ya

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

que su desarrollo no presenta un incentivo económico a pesar de poder satisfacer necesidades de salud.

Reactivo de diagnóstico in vitro rápido: Son aquellos reactivos de diagnóstico In Vitro que no requieren entrenamiento especializado para su utilización, no utilizan equipos complejos para su montaje y cuya interpretación y lectura es visual arrojando resultados cualitativos que se observan ya sea por intensidad de color, aglutinación o formación de anillos, entre otros, destinados por el fabricante para ser utilizados directamente por el usuario.

Reactivo de diagnóstico in vitro para investigación: Cualquier reactivo para el diagnóstico in vitro destinado para llevar a cabo investigaciones efectuadas en un entorno científico y que no tienen como fin su comercialización.

Registro sanitario: Es el acto administrativo expedido por el Invima, mediante el cual se autoriza previamente a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar o procesar un reactivo de diagnóstico in vitro.

Rotulado: Es toda la información adherida sobre el producto realizada en forma impresa, escrita o gráfica o de cualquier otro tipo, producida por el fabricante que acompaña al envase primario o secundario del reactivo de diagnóstico

Señal de Alerta. Situación generada por un caso o un número de casos reportados con una misma asociación o relación causal entre un efecto indeseado y un reactivo de diagnóstico *in vitro*, siendo desconocida o no documentada previamente y que presuma un riesgo para la salud de la población.

Sensibilidad. Capacidad del programa de Reactivovigilancia para detectar señales de alerta de efectos indeseados a nivel nacional.

Trazabilidad. Se refiere a la capacidad del programa de Reactivovigilancia para rastrear un reactivo de diagnóstico *in vitro* desde la producción hasta su uso final.

Vigilancia Proactiva. Actividad por medio de la cual se establecen los puntos críticos en los diferentes procesos de Reactivovigilancia, mediante la aplicación de metodologías de gestión de riesgos, que el Invima aportará a los diferentes actores del programa con el propósito de implementar al interior del sistema de garantía de calidad.

Vigilancia Reactiva. (Vigilancia pasiva). Actividad de la vigilancia epidemiológica que busca obtener información a partir de los reportes voluntarios o espontáneos, apuntando a la descripción de un incidente o evento adverso que ya ocurrió.

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

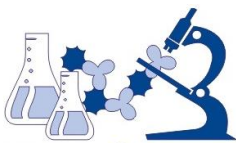
Vigilancia Intensiva. Búsqueda de información frente a situaciones de interés en salud pública, con el ánimo de establecer las acciones pertinentes que permitan identificar, gestionar y contener o mitigar los riesgos que puedan amenazar la salud individual o colectiva de los colombianos.

7. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO²

Clasificación por Categorías: En Colombia la clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario: Categoría III (alto riesgo), Categoría II (mediano riesgo) y Categoría I (bajo riesgo). Decreto 3770 de 2004. Artículo 3°.



² SEGÚN DECRETO 3770 DE NOVIEMBRE 12 / 2004

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Riesgo Moderado



Categoría II

Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro que estén relacionados con las siguientes áreas:

- Biología Molecular
- Química sanguínea
- Hematología
- Inmunología
- Microbiología
- Coproparasitología
- Uroanálisis
- Toxicología

Dec 3770 de 2044, Artículo 3

Programa Nacional de Reactivovigilancia





Alto Riesgo



Categoría III

1. Usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante.
2. Usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás tejidos y órganos para trasplante.
3. Usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, incluyendo las pruebas rápidas.

Nota: Los reactivos para determinación de COVID-19, se clasifican en la categoría III

Dec 3770 de 2044, Artículo 3

Programa Nacional de Reactivovigilancia





	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

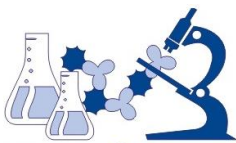
8. SISTEMA ESTANDAR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DE MATERIALES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS (DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704)

La NFPA (National Fire Protection Association), una entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, es ampliamente conocida por sus estándares (National Fire Codes), a través de los cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios.

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar.

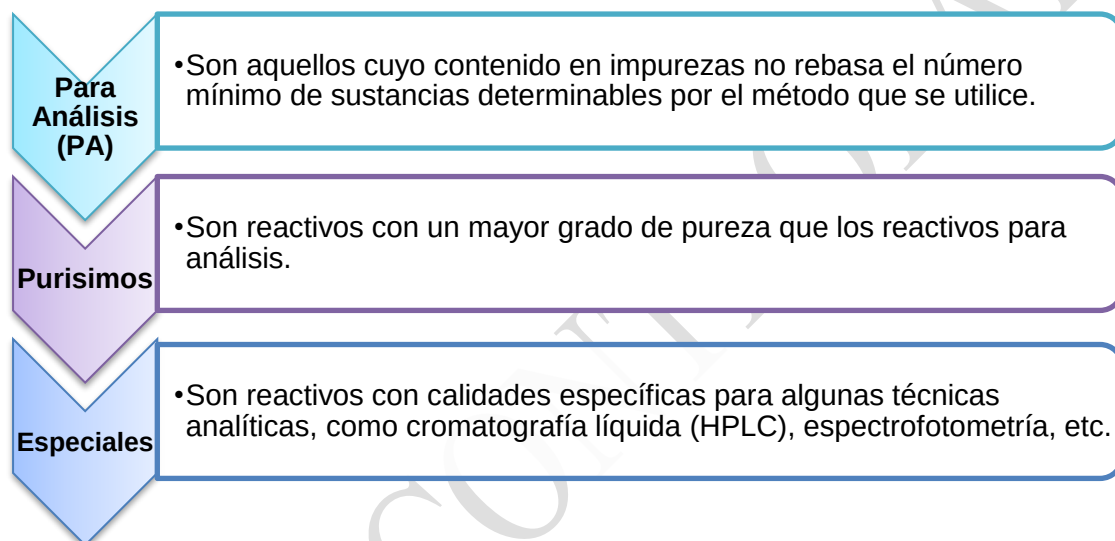
Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos.



 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

9. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS SEGÚN USO

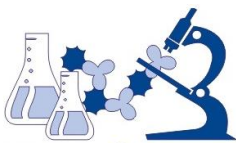
En el laboratorio de análisis se utilizan reactivos de calidad analítica que se producen comercialmente con un alto grado de pureza. En las etiquetas de los frascos se relacionan los límites máximos de impurezas permitidas por las especificaciones para la calidad del reactivo o los resultados del análisis para las distintas impurezas. Dentro de los reactivos analíticos pueden distinguirse tres calidades distintas



10. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA EN LCE

10.1 VIGILANCIA PROACTIVA

- Gestión del riesgo. kardex programa EasyLabs que define la presentación comercial, saldos y pedidos, semaforización, clasificación del riesgo, almacenamiento, uso, riesgo, acciones de mejora y disposición final.
- Control de llegada de reactivos: kardex Registro de la llegada del reactivo, verificando las condiciones de Temperatura, fecha de vencimiento, registro INVIMA, lote, condiciones de empaque envase y etiqueta y fecha de llegada.
- Verificación de control de temperatura
 - Se describe protocolo para garantizar la verificación de temperaturas de neveras de almacenamiento de reactivos y de llegada de los insumos para diagnóstico.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

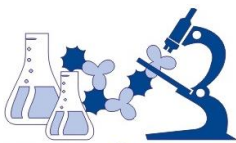
- Control de temperaturas de neveras: Diariamente se registra la temperatura de todas las neveras del laboratorio clínico en el programa MedLab QC, teniendo de esta manera un registro digital que grafica inmediatamente el comportamiento de la temperatura de los refrigeradores y congeladores, las mediciones las realiza el encargado del área, registrando temperaturas AM y PM.
- Control de Temperatura ambiente: Una parte de los reactivos son de almacenamiento fuera de refrigeración, se lleva el control de la temperatura y humedad de las áreas de almacenamiento de reactivos, registrados diariamente am y pm en el programa MedLab QC.

Para fijar los límites permitidos se verifico la temperatura de los insumos y se establece que: La temperatura de ambiente es de 2°C a 27°C, con una media de 23°C. La temperatura de congelación para reactivos y sueros es de -10°C a -30°C, con media de -20°C, La temperatura de refrigeración es de 2°C a 8°C, media de 4°C. La temperatura de incubación es de 37 °C a 37.5°C con media de 37.2°C.

- d)** Proceso de semaforización: Se lleva a cabo los 5 primeros días del mes teniendo en cuenta lo establecido en el protocolo de semaforización
- e)** Formato de limpieza y desinfección de áreas
- f)** La evaluación anual de proveedores en las cuales se califica su desempeño en la calidad de los productos y atención post mercado del mismo.
- g)** Verificación y gestión de alertas en la página del Invima con el fin de verificar si alguno de los reactivos utilizados en el laboratorio se encuentra reportado, en caso de estar reportado se seguirán las recomendaciones dadas por la casa comercial.
- h)** Certificados de análisis de los reactivos; los certificados de análisis se encuentra por parte de la casa comercial en cada una de las paginas se que se adjuntan
 - <https://quimicosalbor.com/certificados-analisis/>
 - <https://www.biomerieux.es/recursos/biblioteca-tecnica>
 - <https://doclib.siemens-healthineers.com/documents?productgroups=1&documenttypes=21,314&countries=46&sortingby=modified-at&direction=desc&languages=4,2>
 - <https://einfo.bio/> lumira

1.1 Aspectos A Evaluar En La Adquisición De Reactivos Diagnostico *Invitro*.

1.1.1 Información Del Proveedor

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

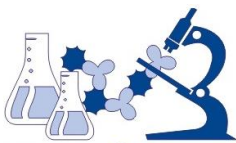
- Los fabricantes nacionales deben contar con concepto técnico de las condiciones sanitarias o con el certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) según sea el caso.
- Los importadores deben contar con el certificado BPM o el certificado de calidad sanitario del país de origen. Igualmente, se deben acreditar por el INVIMA mediante la presentación del certificado de acondicionamiento y almacenamiento (CCAA).
- Los productos deben cumplir con lo reglamentado en el decreto 3770 del 2004 “por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitario y la vigilancia sanitaria de las reactivas de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano”.

1.1.2 Registro Sanitario INVIMA

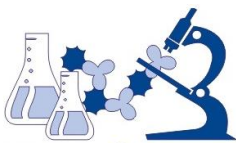
- Todos los reactivos de diagnóstico in vitro deben contar con registro sanitario excepto:
 - Cuando se presentan circunstancias de calamidad o emergencia determinadas por el ministerio de salud y protección social.
 - Cuando se trate de diagnósticos in vitro respecto de los cuales el ministerio de salud y protección social o el INVIMA, haya autorizado investigación clínica en el país, previo concepto de la sala especializada de insumos para la salud y productos varios de la comisión revisora del INVIMA.
- Los reactivos de diagnóstico in vitro de uso de categoría III , cuyo registro sanitario tiene vigencia de 5 años de acuerdo con lo establecido en los artículos 3° y 4° del decreto 3770 de 2004, los cuales incluyen los siguientes reactivos de diagnóstico:
 - Usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre.
 - Usados para asegurar la compatibilidad inmunológica de sangre
 - Usado para diagnósticos de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad
 - Para la vida y la población en general colombiana, incluyendo pruebas rápidas.

1.1.3 En la Recepción de reactivos de diagnósticos INVITRO

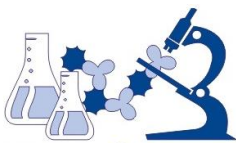
A la recepción del producto se deberá evaluar:

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

ENVASE	Debe contar con un envase primario fabricado con materiales que no reaccionen con el contenido, que lo protejan de factores externos (luz y humedad) y que impidan que se altere sus características físico-químicas y microbiológicas (artículo 24 dec 3770 de 2004), ya que se encuentren en contacto directo con el producto. Los reactivos de diagnósticos invitro deben permanecer en su envase original, salvo que se indique expresamente lo contrario por el fabricante, por tanto , acciones como diluir , alicuotar o reenvasar están prohibidas porque atentan contra las condiciones originales del producto y garantizadas por el fabricante.
ROTULADO	La presentación del producto corresponda a la autorizada en el respectivo registro sanitario (ejemplo mililitros / gramos / etc.) y contener toda información exigida en el artículo 25 del decreto 3770 de 2004: ➤ Nombre del producto ➤ Nombre o razón social del fabricante y del importador. ➤ Número de lote ➤ Fecha de expiración. ➤ Contenido. ➤ Uso propuesto ➤ Condiciones para el almacenamiento. ➤ Precauciones ➤ Registro sanitario. Se debe verificar que el rotulo se encuentre firmemente adherido al producto y la información debe ser legible. En caso de que el espacio disponible para el rotulado no sea suficiente, la información podrá limitarse a la de los numerales 1,2 , 3 y 4, siempre que el resto de la información aparezca en el rotulado del envase secundario o en el inserto y llegue al usuario final. Todo el contenido del rotulado deberá aparecer en idioma castellano para el caso de los fabricados nacionalmente y en el caso de los productos importados, se aceptarán rotulados multilingües, siempre y cuando el inserto este en idioma castellano.
EMPAQUE	El rotulado del envase secundario debe contener toda la información prevista, según lo reglamentado por el artículo 26 del decreto 3770 de 2004.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

	En el caso de los estuches, la fecha de expiración debe corresponder al elemento más próximo a vencerse, aquellos productos que no requieran envase secundario deben cumplir con lo indicado en el rotulado primario y tener el número registro sanitario. Estos empaques secundarios deben ser expresamente autorizados por el INVIMA. Tachones enmendaduras y adhesivos superpuestos no se aceptan, por lo cual será tratado por lo determinado por el decreto 3770 de 2004.
DEL INSERTO	La información del inserto debe suministrarse en idioma castellano al usuario, en medio impreso digital o grafico siempre y cuando se garantice que la información total la posea el usuario final y debe estar según lo establecido el decreto 3770 de 2004. ➤ Nombre del producto ➤ Razón social del fabricante ➤ Aplicación y uso ➤ Componentes ➤ Contenido de estuche ➤ Materiales adicionales requeridos no suministrados ➤ Metodología a. Principio del método b. preparación de reactivos c. Condiciones de almacenamiento y estabilidad de los reactivos. d. Espécimen o muestra e. Procedimiento f. calculo de resultados analíticos ➤ Control interno de calidad ➤ Intervalos de referencia ➤ Precauciones y advertencias ➤ Tecnología- equipo utilizado- (cuando aplique) ➤ Referencias bibliograficas ➤ Contenido y presentación de las etiquetas y empaques ➤ Nombre y domicilio de que acondiciona y almacena
DE LA PRESERVACIÓN	Se deben cumplir con las condiciones de temperatura y humedad, protección de la luz y otros factores externos que amenacen la estabilidad del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las condiciones exigidas.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

	Deben contarse con aspectos físicos, que puedan afectar cambios como precipitaciones, coloraciones, turbidez, entre otros. Tener en cuenta fechas de expiración, cuando se encuentra abierto periodo de vida útil en estantería (si el producto está abierto). Las condiciones de uso y preservación están dadas exclusivas por el fabricante deben ser idénticas a las autorizadas en el registro sanitario.
DE LOS EQUIPOS	El fabricante este debe especificar el tipo de tecnología a utilizar con el reactivo. De otra manera, debe ser claro para usuario que el fabricante no se responsabiliza por las posibles fallas que puedan ocurrir. Todas las técnicas serán evaluadas por el INVIMA , quien recomendara cuales podrán ser utilizados en el tamizaje de las unidades de sangre (resolución 0901/96). Frente al uso de pruebas rápidas, la sala de especializada de reactivos de diagnósticos in vitro de la comisión revisora del INVIMA ha conceptualizado en el acta numero 1 de 2013

1.2 Aspectos Del Almacenamiento De Reactivos.

El Laboratorio Clínico almacenara los reactivos en las neveras destinadas para tal fin, teniendo en cuenta lo siguiente:

- El almacenamiento debe cumplir con las normas de limpieza, desinfección y conservación de los insumos.
- Se debe monitorizar las condiciones de temperatura diariamente.
- Los insumos deben almacenarse según la normatividad vigente.
- Se debe garantizar los stocks mínimos.
- Se deben controlar las fechas de vencimiento con la semaforización respectiva (ver criterios de semaforización)
- Las instalaciones de almacenamiento deben contar con las medidas biosanitarias exigidas, garantizando bioseguridad.

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

- g. Los insumos deben estar organizados en los estantes de acuerdo a su clasificación y de acuerdo al riesgo.
- h. Se debe realizar inspección visual de los productos e insumos en el momento de su recepción; se debe verificar que los productos sean recibidos en las condiciones especificadas por el fabricante (temperatura y otros), que se encuentren en buen estado (etiquetas, empaque, envase, no derrames), que vengan bien embalados, con los respectivos certificados de calidad o conformidad emitidos por los proveedores, de lo cual debe permanecer archivo físico o medios electrónicos.
- i. El encargado del área debe hacer la actualización de la semaforización los primeros 5 días de cada mes.
 - Fecha llegada, Temperatura de llegada, Reactivo, Fabricante, Dirección, Registro invima, Lote, Fecha de vencimiento, Integridad del empaque (primario y/o secundario).
 - Según las características de los insumos, reactivos, y recomendaciones de la ficha, instructivo o empaque, se almacenará de tal forma que no sufra ningún daño (ficha, instructivo o empaque).
- j. El almacenamiento de reactivos se realiza en la nevera de reactivos, debidamente señalizado, semaforizados y organizados.
- k. Los insumos o reactivos que requieren refrigeración se almacenan en la nevera de 2 a 8 °C en el refrigerador asignado para estos productos.
- l. Se realizará control de temperatura diaria a estos refrigeradores.
- m. Se realiza control de humedad de ambiente en el almacén

1.2.1 Semaforización Para El Manejo De Las Fechas De Expiración En Los Reactivos.

El profesional responsable de cada una de las áreas debe hacer la actualización de la semaforización los primeros 5 días de cada mes. Esta se realiza según la rotación de los reactivos, teniendo en cuenta que:

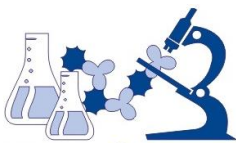
 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Tabla 1. Color de Etiquetas para semaforización de reactivos

Etiqueta roja	los reactivos más próximos a vencerse menor de 1 meses
Etiqueta Verde	los reactivos que tienen mayor de 1 de vencimiento

El kardex semaforiza inmediatamente se ingresa la fecha de vencimiento del reactivo. FORMATO DE SEMAFORIZACIÓN DE REACTIVOS.

Cuando los criterios de almacenamiento se han cumplido y se evidencia por los controles realizados que el reactivo no funciona adecuadamente, se debe informar a la casa comercial para su revisión y reposición.

1.3 Aspectos de Trazabilidad De Los Reactivos

La trazabilidad de los reactivos comienza desde:

- La recepción: se evalúa la integridad, temperatura cuando llegan de lo contrario se realiza su devolución
- El almacenamiento: regulando las temperaturas de las neveras diariamente
- El consumo: Descargue diarios de uso
- Disposición final: Entrega a RH

1.4 Aspectos de la Frecuencia de solicitud de reactivos

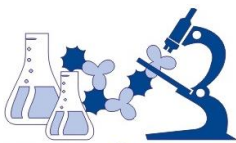
- Las frecuencias de pedidos se realizan mensual o cada semana según cronograma de rotación, revisando el aplicativo las existencias.

1.5 Aspectos de la Disposición De Final de Reactivos

Remitirse al Manual de Clasificación Y Eliminación De Desechos a (PGIRHS)

1.5.1 Criterios Para Desechar Los Reactivos

- Cuando se almacenan de manera inadecuada
- Cuando la estabilidad del reactivo se perdió
- Cuando se alteren sus propiedades físicas, químicas u organolépticas.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

- Cuando a la entrega se determina que el reactivo fue transportado de mala manera y puede haberse afectado, no se debe recibir
- Cuando se ha mezclado con otro reactivo u otra sustancia que altere sus propiedades
- Cuando presentan turbidez causada por contaminación.

2. VIGILANCIA REACTIVA

Cuando se identifique un evento adverso o un incidente relacionado con el uso de un reactivo de diagnóstico IN VITRO, asociado a fallas del producto, al uso del producto o al profesional responsable del área se realiza el reporte en los formatos según tipos de reporte (ver numeral 9.1 y 9.2)

El reporte es una actividad que tiene como fin principal suministrar al INVIMA, fabricante, importador e institución prestadora de servicios de salud, información clara, veraz y confiable sobre el riesgo de generación de situaciones indeseables relacionado con un reactivo de diagnóstico in vitro antes o durante su uso.

Según el decreto 3770 de 2004 para realizar la vigilancia sanitaria a los reactivos de diagnóstico in vitro, inicialmente la IPS debe realizar la inscripción ante el INVIMA a través del formulario de inscripción a la Red Nacional de Reactivovigilancia, con el fin de ratificar la intención de participar en la Red y el compromiso de participar en las actividades que de esta se generen.

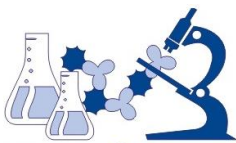
2.1 Efectos Indeseados Con Reactivos De Diagnóstico In Vitro

El uso previsto por el fabricante es el resultado de las actividades de Investigación y Desarrollo adelantadas por los fabricantes y por lo tanto, cualquier modificación que implique el cambio de lo garantizado por el fabricante, representa un riesgo por cuanto no se conoce el comportamiento del producto bajo condiciones diferentes a las que sin que autoriza la autoridad sanitaria – INVIMA a través del Registro Sanitario.

La incorrecta utilización de los reactivos de diagnóstico in vitro así como defectos en la calidad inherentes al producto, pueden ocasionar daños no intencionados al paciente, al operador o al medio ambiente. Estos se conocen como efectos indeseados.

De acuerdo con el artículo 6º de la Resolución 2013038979 del 26 de Diciembre de 2013 los efectos indeseados con reactivos de diagnóstico in vitro se clasifican en:

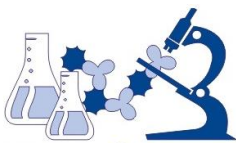
Los efectos indeseados con reactivos de diagnóstico *in vitro* se clasifican en:

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS		Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		VERSIÓN: 09
			FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

- **Evento Adverso.** Daño no intencionado al usuario, paciente o al medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico *in vitro*.
- **Incidente.** Potencial daño no intencionado al usuario, paciente o al medio ambiente que podría ocurrir como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico *in vitro*. Así mismo, cualquier circunstancia que suceda en la atención clínica que aunque no genere daño, en su ocurrencia incorpore fallas en los procesos de atención.

2.2 Reporte de incidentes y eventos adversos.

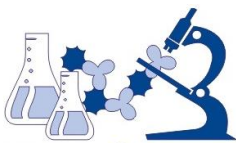
NOMBRE DEL PROCESO:		REACTIVO VIGILANCIA			
PROCEDIMIENTO		Reporte de Incidentes y Eventos adversos de RDIV			
QUE	QUIEN	CUANDO	PARA QUE	COMO	
Socializar al personal del programa Reactivo vigilancia	Referente de Reactivo vigilancia	Todo el año e inducción al cargo	Generar cultura de seguridad y de notificación	La institución a cuerda cronograma de capacitación mediante charla magistral y en inducciones al cargo	
Diligenciar el formato de reporte de eventos adversos RDIV	Personal asistencial	Se detecte la ocurrencia de un evento adverso	Analizar los incidentes y eventos adversos	E el formato de reporte de INVIMA TRIMESTRAL DE INCIDENTES O FORMATO DE REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS INVIMA REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (RDIV) (REPORTE INMEDIATO)	
Recepcionar, clasificar y direccionar los reportes	Referente de Reactivo vigilancia	Cada vez que se genere el reporte	Dar continuidad al programa de Tecnovigilancia	Llegan los reportes a Responsable de Programa de Reactivo vigilancia y se analizan en el Comité de Reactivovigilancia por protocolo de Londres formato FORMATO DE REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS INVIMA REACTIVOS DE	

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS		Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		VERSIÓN: 09
			FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

				DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (RDIV)
Analizar y dar respuesta a los eventos adversos recepcionados	Comité de Reactivo vigilancia	Cada vez que alguien reporte	Generar acciones de mejora con respecto a los eventos adversos	El comité de seguridad del paciente, analiza, evalúa, toma acciones correctivas notificando a los interesados según sea el caso
Realizar seguimiento a las acciones correctivas implementadas	Referente de Reactivo vigilancia	cada vez que se genere una acción correctiva relacionado con medicamentos o tecnología en salud	Verificar cumplimiento funcionalidad y realizar ajustes.	Dependiendo de acciones correctivas se deja constancia en el FORMATO DE REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS INVIMA REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (RDIV)
Notificar al INVIMA o a alza entidades de salud correspondientes	Referente de Reactivo vigilancia	Cada vez que se genere un reporte relacionado con RDIV	Alimentar la base de datos nacional	Se ingresa a la página del INVIMA para realizar un reporte en línea del EVENTO ADVERSO (formato INVIMA) o Si el caso corresponde a un INCIDENTE, envíe el consolidado trimestralmente (en el formulario electrónico INVIMA) al INVIMA, en los tiempos establecidos
Realizar revisiones periódicas de alertas	Referente de Reactivo vigilancia	Según alerta y cronograma	Dar seguimiento al programa de Reactivo vigilancia	Revisión mensual de boletines generados por el INVIMA

2.3 Referente de Reactivovigilancia

La Coordinación del Programa de Reactivo Vigilancia se encuentra a cargo del Referente designado por la Dirección. Se capacita al personal asistencial con el respectivo entrenamiento, que cumplen con la función de ser Oficiales de Seguridad del Paciente, realizando supervisión,

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

aplicando listas de chequeo que permiten verificar el cumplimiento de las estrategias de reactivo vigilancia, búsqueda activa de fallas y eventos adversos y promoción de la cultura de seguridad.

La revisión de eventos se hace mensual y en momento de una notificación de evento adverso se hace el análisis y toma de decisiones en los servicios de la siguiente forma:

- Recepción Técnica de Reactivos
- Suministro de reactivos en área de procesamiento de muestras

Entre las funciones más importantes del Programa de Reactivo vigilancia están: Promoción de la Cultura de reporte y gestión de incidentes y eventos adversos, supervisión y comités de seguridad con la aplicación e implementación de protocolo de Manejo de Reactivos de Diagnostico In Vitro

El seguimiento al programa de reactivo vigilancia se llevara a cabo dentro de los Comités de Seguridad de Paciente, donde se presentaran y analizaran los casos notificados para toma de decisiones y planes de acción.

La persona responsable del seguimiento y cumplimiento al Programa Institucional de Reactivo Vigilancia es la Bacteriologa Liiana Andrea Pito Burbano, Cargo: Coordinadora de Calidad.

2.4 Funciones Del Responsable De Programa De Reactivo vigilancia

Registrar y analizar los datos de todos los reportes de Eventos Adversos o Incidentes asociados con un Reactivo de Diagnostico *In Vitro*.

Gestión de los eventos o incidentes asociados a los Reactivo de Diagnostico *In Vitro*

Recomendar medidas preventivas para tomar acciones inmediatamente ocurrido el evento

Orientar a los informantes en el diligenciamiento del **formato de reporte**.

2.5 Tipos De Reporte

2.5.1 Reporte inmediato.

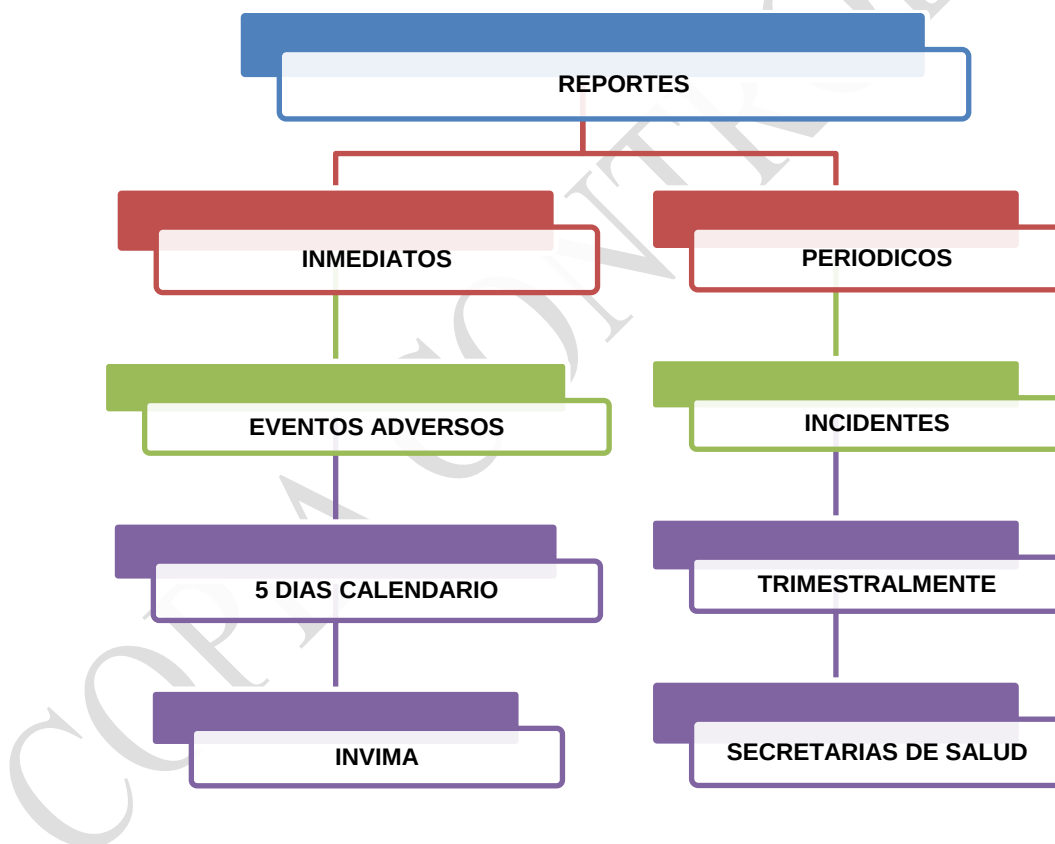
En caso de presentarse un **evento o incidente adverso serio** con los RDIV para uso en humanos, debe realizarse el reporte de dicho incidente, utilizando el correspondiente formato ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y deberá contener la información

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

relacionada en el artículo 14 de la presente resolución, dentro de de los cinco (5) días calendario siguiente al conocimiento de la situación

2.5.2 Reporte Periódico.

Toda la información de los reportes de **eventos adversos no serios** con dispositivos médicos para uso en humanos, junto con las posibles medidas preventivas tomadas, deben ser presentadas trimestralmente y en forma consolidada al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima o a las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud según sea el caso INVIMA, en formato en los tiempos establecidos de acuerdo a RESOLUCIÓN 2013038979 DE 2013 del Invima.



	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS		Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		VERSIÓN: 09
			FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

2.6 Como Reportar?

Se ingresa a la pagina <https://farmacoweb.invima.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb>, se ingresa USUARIO: Labmarthaperdomo y CONTRASEÑA; Perdomo530326



Usuario

Contraseña

 Digite su contraseña

Ingresar

[Registrarse en programa](#)
[Recordar Contraseña](#)

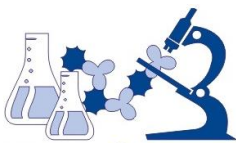
Manual:

[Instructivo para registrarse en el aplicativo](#)

Tutorial:

[Videotutorial de Ayuda](#)

Se despliega las opciones de reporte que son Reporte de Eventos Adversos, Reporte Trimestral en Cero, Reporte Masivo Trimestral.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

OPCIONES DE REACTIVO VIGILANCIA

Regresar

Salir

Inicio

RET SE008 - REPORTE TRIMESTRAL EN CERO, POR PARTE DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

[Manual](#) [Videotutorial de ayuda Reporte Cero](#)

TIEMPOS DE NOTIFICACIÓN DEL REPORTE TRIMESTRAL SIN EVENTO

Periodo	Tiempo de Notificación
Primer Trimestre Enero a Marzo	Los primeros ocho (8) días calendario del mes de Abril
Segundo Trimestre Abril a Junio	Los primeros ocho (8) días calendario del mes de Julio
Tercer Trimestre Julio a Septiembre	Los primeros ocho (8) días calendario del mes de Octubre
Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	Los primeros ocho (8) días calendario del mes de Enero

REPORTE TRIMESTRAL EN CERO, POR PARTE DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

1. NIT DE LA ORGANIZACIÓN:
34530326

2. RAZÓN SOCIAL:
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS

Nota Aclaratoria: A continuación podrá notificar ante el INVIMA que la organización, NO presentó Eventos adversos e incidentes con el uso de los reactivos de diagnóstico invitro, durante el trimestre, marcando el periodo y el año correspondiente. Este se habilita los cinco primeros días hábiles posteriores a la finalización del trimestre. Tenga en cuenta que el sistema no le permitirá realizar notificaciones de años anteriores, solo de trimestres anteriores durante la misma vigencia. Si notifica por fuera de los tiempos establecidos estos quedarán marcados como extemporáneos.

3. Año de Reporte
Seleccione el Año de Reporte

4. Período (Trimestre):
Seleccione el Período

5. Observación del Reportante:

4000 caracteres pendientes

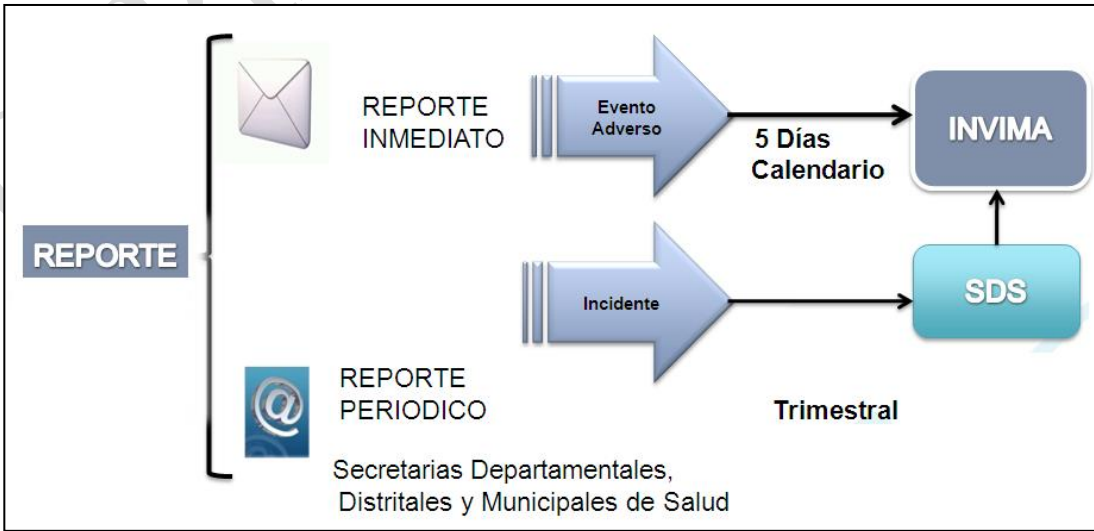
La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios.
El Ministerio de Salud y la Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979).

Guardar

Cancelar

2.7 A Quien Se Reporta?

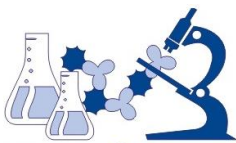
Cuando se identifique un evento adverso o incidente ocasionado por fallas en la calidad de un reactivo el responsable de área se lo comunica a la coordinadora para dar aviso al comité de Reactivovigilancia este lo evaluara y clasificara el efecto indeseado se reporta al INVIMA y a la secretaria de salud distrital. El reporte inmediato debe ser enviado por la pagina mencionada en como reportar.



```

graph LR
    subgraph REPORTE
        RI[REPORTE INMEDIATO]
        RP[REPORTE PERIODICO]
    end
    RI --> EA[Evento Adverso]
    RI --> I[Incidente]
    EA -- "5 Días Calendario" --> INVIMA[INVIMA]
    I -- "Trimestral" --> SDS[SDS]
    SDS --> INVIMA
    RP --> SD[Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Salud]
  
```

27

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO		Código: PS.MR-07
	PRESTACION DE SERVICIOS		VERSIÓN: 09
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

2.8 Formatos De Reporte

2.8.1 Formato de Reporte Trimestral

A. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE												
CÓDIGO INVIMA	CÓDIGO INTERNO ASIGNADO POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR	A1 Nombre de la Institución	A2 NIT	A3 Naturaleza	A4 Grado de Complejidad	A5 Ciudad	A6 Departamento	A7 Servicio, área o institución reportante	A8 Dirección	A9 Teléfono	A10 Correo Electrónico	A11 Fecha del reporte dd/mm/aaaa

B. INFORMACIÓN DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>												
B1 Nombre Comercial del Reactivo	B2 Registro Sanitario	B3 Fecha de vencimiento dd/mm/aaaa	B4 Lote	B5 Procedencia	B6 Requiere cadena de frío	B7 Temperatura almacenamiento requerida	B8 Categoría del reactivo según el riesgo (Decreto 3770 de 2004)	B9 Notificó a:	B10 Especificaciones de uso del reactivo	B11 Se cumplieron con las condiciones de almacenamiento según especificaciones del fabricante	B12 ¿Se realiza recepción frente a especificaciones técnicas del RDIV?	B13 ¿El producto cuenta con certificado de análisis?

C. CLASIFICACION DEL REPORTE Y ANALISIS						D. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE						
C1 Descripción del efecto indeseado	C2 Fecha de ocurrencia del evento adverso o incidente dd/mm/aaaa	C3 La detección del evento adverso o incidente fue	C4 ¿Cuál fue el problema con el reactivo o la prueba?	C5 Tipo y clasificación del reporte	C6 Consecuencia de la falla en el reactivo	D1 Nombres y Apellidos	D2 Tipo de identificación	D3 Número de identificación del paciente	D4 Género	D5 Edad	D6 Teléfono	D7 Dirección

E. GESTION REALIZADA POR LA INSTITUCION REPORTANTE							F. IDENTIFICACIÓN DEL REPORTANTE					
E1 ¿La institución tiene implementado un programa de gestión de riesgos?	E2 ¿Se realizó algún tipo de análisis del efecto indeseado?	E3 ¿Qué herramienta utilizó para el análisis del evento adverso o incidente?	E4 ¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado?	E5 Describa la causa o factores que favorecieron que se presentara el efecto indeseado reportado	E6 ¿Qué medidas se adelantaron?	E7 ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)?	F1 Nombres y Apellidos del reportante	F2 Profesión o cargo	F3 Área de donde se origina el reporte	F4 Dirección	F5 Teléfono	F6 Correo electrónico

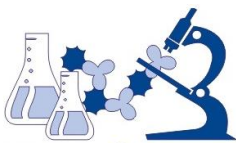
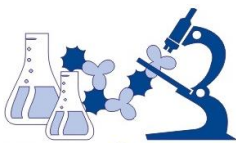
 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Tabla 2. Los Tiempos De Notificación Del Reporte Trimestral Por Parte De Las Ips

Periodo	Tiempo de notificación
• Primer Trimestre Enero a Marzo	• Primera semana de Abril
• Segundo Trimestre Abril a Junio	• Primera semana de Julio
• Tercer Trimestre Julio a Septiembre	• Primera semana de Octubre
• Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	• Primera semana de Enero
Tabla 1. Tiempos de notificación para reporte periódico de Reactivovigilancia	

2.8.2 Formato De Reporte Invima Eventos Adversos RDIV

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA POST MERCADO REACTIVOS DE DIAGNOSTICO "IN VITRO" RDIV	
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	FORMATO DE REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (RDIV).
Para uso exclusivo del INVIMA No. _____	
A. LUGAR DE OCURRENCIA DEL EFECTO INDESEADO	
1. Nombre de la Institución:	2. NIT:
3. Naturaleza de la institución reportante : Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐	4. Nivel de complejidad de la institución: 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ N/A: ☐
5. Ciudad:	6. Departamento:
7. Dirección:	8. Teléfono:
9. Correo electrónico:	10. Fecha del reporte: dd/mm/aaaa
B. INFORMACIÓN DEL PACIENTE	
1. Nombres y apellidos:	
2. Tipo de identificación: NUIP ☐ T.I. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐	3. Número de identificación del paciente:
4. Género: Masculino ☐ Femenino ☐	5. Edad: Días ☐ Meses ☐ Años ☐ Semanas ☐
6. Teléfono:	7. Dirección:
C. IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO "IN VITRO"	
1. Nombre comercial del reactivo:	2. Registro Sanitario:
3. Lote:	4. Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa
5. Procedencia: Nacional ☐ Importado ☐	6. Requiere cadena de frío: Si ☐ No ☐
7. Temperatura almacenamiento requerida: _____ °C	8. Nombre o razón social del Importador y/o Distribuidor:
9. Servicio o Área de funcionamiento del reactivo en el momento del efecto indeseado: Laboratorio clínico ☐ Laboratorio de Salud Pública ☐ Servicio Transfusional ☐ Banco de Sangre ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____	
10. ¿Se cumplieron con las condiciones de almacenamiento según especificaciones del fabricante?: Sí ☐ No ☐	11. ¿El producto cuenta con certificado de análisis? Si ☐ No ☐
D. EVENTO ADVERSO Y/O INCIDENTE	
1. Fecha de ocurrencia del efecto indeseado: dd/mm/aaaa	2. Fecha de elaboración del reporte: dd/mm/aaaa
3. Detección del efecto indeseado:	Antes del uso del RDIV ☐ Durante el uso del RDIV ☐ Después del uso del RDIV ☐
4. ¿Cuál fue el problema con el reactivo o la prueba?	Calidad Envase: ☐ Empaque: ☐ Inserto: ☐ No de Registro Sanitario: ☐ Desempeño Errores imputables al reactivo en el desarrollo de un prueba: ☐
5. Clasificación del efecto indeseado: Evento Adverso ☐ → Si es un evento, continúe con el punto 7	

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Incidente ☐ → Si es un incidente, continúe en la sección E	
6. Descripción del efecto indeseado: 	
7. Desenlace del efecto indeseado: (Marque más de uno si es necesario) : Daño de una función o estructura corporal ☐ Muerte ☐ Retraso en el diagnóstico ☐ Hospitalización o prolongación de la hospitalización ☐ No prescripción de tratamiento requerido ☐ Tratamiento inapropiado ☐ Transfusión de producto biológico no adecuado ☐ Intervención médica ☐ Intervención quirúrgica ☐ Intervención psicológica ☐ Diagnóstico incorrecto ☐ Otra ☐ ¿Cuál?: _____	
E. GESTIÓN REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN REPORTANTE	
1. ¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado? : Si ☐ No ☐	
2. Causa probable del efecto indeseado:	
3. ¿Notificó a?: Importador: Si ☐ No ☐ Fabricante: Si ☐ No ☐ Comercializador: Si ☐ No ☐ Distribuidor: Si ☐ No ☐ dd/mm/aaaa	
4. Se ha enviado el reactivo al Importador y/o Distribuidor: Si ☐ No ☐	
5. ¿La institución tiene en funcionamiento un programa de gestión de riesgos? : Si ☐ No ☐	
6. ¿Se realizó algún tipo de análisis del efecto indeseado? Si ☐ No ☐	
7. ¿Qué herramienta utilizó para el análisis del efecto indeseado? : Protocolo de Londres ☐ AMFE ☐ Espina de pescado ☐ N/A ☐ Otra ☐ ¿Cuál?: _____	
8. Describa la causa o factores que favorecieron que se presentara el efecto indeseado reportado: 	
9. ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)? : Si ☐ No ☐ ¿Cuáles? _____ _____ _____	
F. IDENTIFICACION DEL REPORTANTE	
1. Nombres y Apellidos:	2. Número de identificación:
3. Profesión:	4. Cargo:
5. Área de la organización a la que pertenece:	
6. Dirección de correspondencia:	7. Ciudad o Municipio:
8. Departamento:	9. País:
10. Teléfono de domicilio:	11. Celular:
12. Fecha de notificación: dd/mm/aaaa	13. Correo electrónico personal:
14. ¿Autoriza la divulgación de la información y origen del reporte al fabricante y/o importador?: Si ☐ No ☐	
La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979). Enviar vía email a reactivovigilancia@invima.gov.co o vía Fax 2948700 Ext. 3607 o a la dirección Carrera 68D 17-11/21 Bogotá D.C. – Colombia	

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

2.9 Comité Para El Análisis De Casos Notificados

Se evaluará todo lo relacionado con los hallazgos encontrados en el Laboratorio Clínico en el comité de Seguridad del Paciente, donde se evaluará la metodología del análisis mediante protocolo de Londres, de las posibles fallas o factores contributivos del reactivo involucrado y así reporte de acuerdo a su naturaleza serio no serio, ante el INVIMA.

2.10 Gestión De Los Reportes Por Parte Del Invima

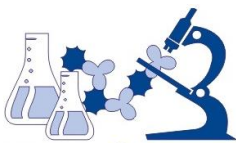
➤ REPORTES INMEDIATOS.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) deberá:

- Envía la confirmación del recibo del reporte, en el menor tiempo posible.
- Realizará una evaluación de forma inmediata que incluya causalidad, frecuencia y gravedad de la información contenida en el reporte, clasificación del reactivo por riesgo y nivel de complejidad de las áreas en donde se genera el efecto indeseado, tomando como base el análisis preliminar argumentado, enviado por el reportante primario, con las investigaciones adelantadas, sobre la causalidad de la situación reportada.
- De los resultados obtenidos en la evaluación de los reportes inmediatos, se desprenderán las acciones preventivas y/o correctivas a que haya lugar, con el fin de mitigar el riesgo y evitar su repetición.
- Si es del caso, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, continuará el proceso investigativo y solicitará al fabricante o responsable del reactivo de diagnóstico *in vitro* que figure como tal en el registro sanitario, una investigación sobre el asunto, la cual deberá ser allegada al Instituto dentro del término que este señale en cada caso.

Una vez se concluyan las investigaciones pertinentes, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá a:

- Cerrar definitivamente la investigación del efecto indeseado.
- Cerrar la investigación del efecto indeseado con seguimiento durante un periodo de tiempo definido. Si durante este periodo no hay elementos nuevos, se cerrará definitivamente.
- Realizar las acciones preventivas y correctivas.
- Tomar medidas sanitarias si es del caso.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

- e. Revisar el alcance de la situación por medio de los mecanismos disponibles incluyendo la evaluación por parte de la Sala Especializada de Reactivos de Diagnóstico *In Vitro* para la toma de decisiones en materia de protección de la salud pública.

La determinación del cierre de un reporte de efecto indeseado, alerta, informe de seguridad o recogida del producto teniendo en cuenta la evidencia recolectada, será potestad exclusiva del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

➤ REPORTES PERIÓDICOS.

A la información contenida en los reportes trimestrales se dará el siguiente trámite:

Una vez recibidos los reportes trimestrales directamente o a través de las diferentes Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, deberá:

- a. Enviar al reportante la confirmación de la recepción del informe en el menor tiempo posible.
- b. Recolectar, consolidar y realizar la evaluación de la información teniendo en cuenta parámetros tales como clasificación del reactivo de diagnóstico *in vitro* por riesgo, frecuencia de los efectos indeseados reportados y las acciones realizadas.

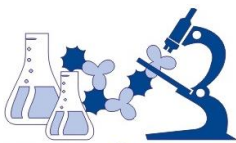
De los resultados obtenidos de la evaluación de los reportes trimestrales, se desprenderá la decisión de la toma de acciones preventivas y/o correctivas. Si de dichos informes se deriva la necesidad de generar políticas o reglamentación relacionada con los reactivos de diagnóstico *in vitro*, se deberá informar al Ministerio de Salud y Protección Social para que este expida la reglamentación o establezca las políticas y acciones correctivas.

3. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA

3.1 Adaptar e implementar el Programa de Reactivo vigilancia

Adoptar y adaptar el Programa de Reactivo vigilancia, atendiendo los lineamientos que para el efecto establezca el Invima, con el fin de gestionar toda la información necesaria para la investigación y análisis de aquellas situaciones que puedan constituirse en efectos indeseados, relacionados con el uso de los reactivos de diagnóstico *in vitro*.

3.2 Sistemas de información y comité

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Contar con un sistema de información que permita disponer de toda la información para adelantar las investigaciones tendientes a establecer una posible relación de causalidad entre la ocurrencia de un efecto indeseado y el uso de los reactivos de diagnóstico *in vitro* utilizados.

3.3 Capacitación continuada

Informar, divulgar y aplicar las prácticas adecuadas de utilización de los reactivos de diagnóstico *in vitro*.

El responsable designado capacitara al personal del área en implementación, diligenciamiento de formato y reporte ante del Invima, los profesionales deben:

1. Registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado causado por un reactivo de diagnóstico *in vitro*, utilizando para ello el formato de reporte del Invima.
2. Recomendar medidas preventivas y correctivas frente a los efectos indeseados identificados.
3. Orientar a los informantes en el correcto diligenciamiento del formato de reporte.
4. Enviar la información recolectada de manera oportuna al Invima de acuerdo con el tipo de reporte para la toma de decisiones, dentro de los términos establecidos en la presente resolución.
5. Participar en las estrategias de vigilancia planteadas por las autoridades sanitarias nacionales o territoriales de acuerdo con las prioridades detectadas.

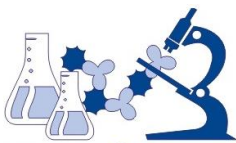
3.4 Vigilancia Proactiva y Reactiva

Estar atentos y vigilantes al desempeño, calidad y seguridad de los reactivos de diagnóstico *in vitro* y reportar la ocurrencia de efectos indeseados al Invima dentro de los términos que establece la presente resolución, y así mismo, informar al fabricante o importador del correspondiente reactivo de diagnóstico *in vitro*.

Responder oportunamente ante cualquier petición del Invima, relacionada con información o requerimientos adicionales en el marco de las investigaciones adelantadas, dentro de los términos establecidos para tal fin, en la presente resolución.

3.5 Seguimiento a las Alertas

Las alertas internacionales recibidas por el responsable designado del Programa Institucional de Reactivovigilancia deben ser divulgadas en el interior del Laboratorio. Pagina <https://app.invima.gov.co/alertas/>

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS		Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA		VERSIÓN: 09
			FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

Formato para registro de alertas de reactivovigilancia

 Laboratorio Clínico Especializado Martha Cecilia Perdomo IPS NIT 34530326-3 Bacterióloga y Laboratorista Clínico – U. Católica Especialista en Microbiología Médica – U. Javeriana		 icontec ISO 9001 SG-CER112260	 ICoNet	Código CA.FR-26 Versión: 06 Fecha: enero 2024 Página 1 de 1		
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD REPORTE DE ACCIONES INSEGURAS, INCIDENTES Y/O EVENTO ADVERSO						
NOMBRE DEL PACIENTE MARCA / SERIE / LOTE	CEDULA PROVEEDOR / NOMBRE DE REACTIVO, FARMACO O DM/ INVIMA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EVENTO	CUALES FUERON LAS CAUSAS	CLASIFICACIÓN	Acciones Tomadas	Responsable
				AI INC EA		

4. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

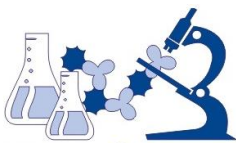
Blanca E. Cajigas, *ASPECTOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS DE RELEVANCIA EN MATERIA DE REACTIVOVIGILANCIA*, Grupo Vigilancia Epidemiológica INVIMA.

Elkin O. Cifuentes, *PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA EN COLOMBIA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS MANUAL OPERATIVO AJUSTADO A LOS RESULTADOS PARA LA APLICACIÓN DE AMFE COMO HERRAMIENTA DE REACTIVOVIGILANCIA PROACTIV*, INVIMA. 2013

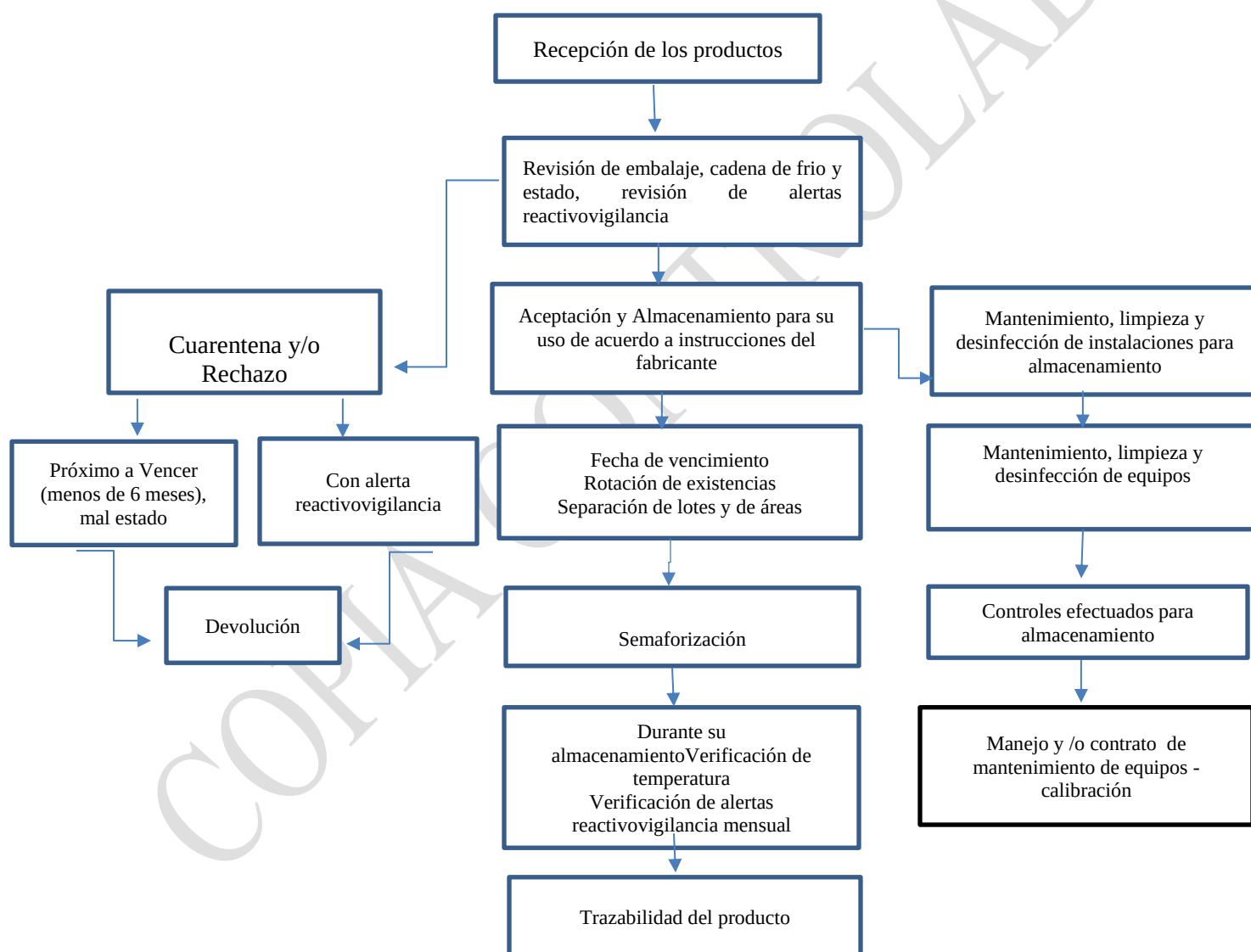
Zulma Valbuena J., *VIGILANCIA POSTMERCADO DE LOS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO. PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA*. Coordinadora Grupo de Vigilancia Epidemiológica. BOGOTÁ D.C, 18 DE NOVIEMBRE DE 2014

INVIMA- INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3132%3Asistema-de-reporte&catid=326%3Asistema-de-reporte&Itemid=2188)

Decreto 3770 de 2004, Resolución 132 de 2006, Resolución 1229 de 201

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

ANEXO 1. FLUJOGRAMAS MANEJO DE REACTIVOS Y REACTIVOVIGILANCIA



	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

6.1 REACTIVO VIGILANCIA

Teniendo en cuenta la Resolución 2013038979 del 26 de Diciembre de 2013 "Por la cual se implementa el Programa Nacional de Reactivovigilancia.

1. Se designa el responsable del programa de Reactivovigilancia. Acta de constitución No. 02
2. Se inscribe a la red nacional
3. Se registra, analiza y gestiona todo efecto indeseado; Formato de no conformes, incidentes y eventos adversos
 - a. Todo evento se reporta en el formato ..\..\Publico - Registros\CA.FR-26 Control Servicio NC, Incidentes y Eventos Adversos.xls y se analiza en el aplicativo de seguridad del paciente, desplegando el protocolo de Londres.
 - b. Luego llena en línea el reporte oficial del INVIMA.
4. Elaboración del documento institucional que defina elementos conceptuales, operativos, administrativos, entre otros. Para esto se establece el siguiente manual, actualiza y socializa.
5. Establecer mecanismos de capacitación. ..\..\Proceso Gestión de Calidad\Formatos y Registros\CA.FR-06 Cronograma de actividades y formación.xls
6. Incluir las actividades de mejora. Se deja registro en caso de suceso en el formato CA.FR-26 y en el aplicativo de seguridad del paciente.
7. Documentar mediante procedimientos aprobados las actividades, incluyendo los puntos críticos de control y participar en las estrategias de vigilancia.

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA PROACTIVA

REPORTES

- i) **Mensualmente** el líder del programa se encargará de revisar las alertas de reactivos generadas por el INVIMA, ingresando a la página www.invima.gov.co/reactivovigilancia/gestión alertas/año/mes., con el fin de verificar si alguno de los reactivos utilizados en el laboratorio se encuentra reportado, en caso de estar reportado inmediatamente el reactivo deberá ser dado de baja y se informará al personal sobre la alerta y a la casa comercial y se seguirán las recomendaciones dadas.
Se deja registro de la búsqueda en: ..\Programas\Programa de reactivo, fármaco y tecnovigilancia\ALERTAS INVIMA\Alertas invima

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

- j) Trimestralmente** los primeros días de Abril, Julio, Octubre y Enero, se envía el consolidado de los reportes de los efectos indeseados relacionados con los reactivos al correo: reactivovigilanciacauca@gmail.com.
- k) El reporte inmediato**, se realiza en caso de presentarse un EA, con el formato del INVIMA ..\Programas\Programa de reactivo, fármaco y tecnovigilancia\REACTIVOVIGILANCIA\Archivo 6.pdf) Formato reporte.pdf. Una vez diligenciado se debe enviar dentro de los primeros 5 días al correo reactivovigilanciacauca@gmail.com y reactivovigilancia@invima.gov.co.
- l) Reporte de retiro de productos del mercado** Es el reporte mediante el cual un fabricante o importador informa a la autoridad sanitaria sobre el retiro de un producto o lote de producto del mercado, cuando éstos supongan un riesgo para la salud de los pacientes. El reporte del retiro del producto abc reactivovigilancia de 20 debe realizarse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la primera comunicación emitida por el fabricante o casa matriz al respecto, conocida por el importador, fabricante y/o responsable del producto
- m) Reporte de alertas internacionales** Se producen cuando el importador autorizado para comercializar reactivos de diagnóstico in vitro en Colombia informa al INVIMA, sobre la generación de una alerta internacional por parte de la casa matriz en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial, en la que se vea involucrado un reactivo comercializado en Colombia. Los titulares de registros sanitarios e importadores deben notificar al INVIMA dicha situación dentro de los cinco (5) días hábiles de conocerse la alerta.

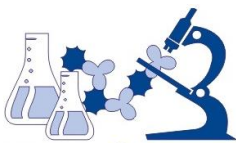
Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro

La clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario, Categoría III (alto riesgo), Categoría II (mediano riesgo), Categoría I (bajo riesgo), teniendo en cuenta el conocimiento, entrenamiento, tecnología, análisis e impacto del resultado, de acuerdo con lo siguiente:

Categoría I: Incluye los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro:

BAJO RIESGO SANITARIO

- 1- Medios de cultivo
- 2- componentes de reposición de estuche
- 3- Materiales colorantes
- 4-Soluciones diluyentes, tampones y lisantes.
- 5-Soluciones de lavado

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

Categoría II: Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro que estén relacionados con las siguientes áreas:

MEDIANO RIESGO SANITARIO

- 1- Biología molecular
- 2- Endocrinología
- 3- Tóxico-farmacología
- 4-Química Sanguínea
- 5-Hematología
- 6-Inmunología
- 7-Microbiología
- 8-Coproparasitología
- 9-Caogulación
- 10-Gases sanguíneos
- 11-Uroanálisis
- 12-Células de rastreo de inmunohematología
- 13-Pruebas de auto diagnóstico y autocontrol

Categoría III: Incluyen los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro:

ALTO RIESGO SANITARIO

1. Usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante.
 - HIV I-II
 - HTLV I-II
 - Chagas
 - Sífilis
 - Hepatitis B
 - Hepatitis C
2. Usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás tejidos y órganos para trasplante.
 - Grupo ABO (detección Ag-Ac)
 - Factor Rh (antígeno D) y variante Du
 - ACS Histocompatibilidad HLA
 - Rastreo de Anticuerpos

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

- Coombs y control de Coombs

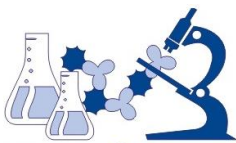
3. Usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, incluyendo las pruebas rápidas. (Decreto 3770 de 2004, Artículo 3º Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro).

- Toxoplasma
- Rubéola
- Herpes
- Dengue

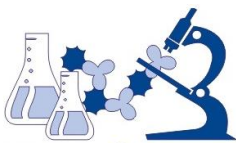
La Categoría **II** incluye todos los reactivos de diagnóstico in vitro que no estén específicamente relacionados en las Categorías **I** o **III**.

FALLAS POTENCIALES

ETAP A	FALLA POTENCIA L	EFECTO POTENCIA L DE LA FALLA	CAUSAS POTENCIALES	ACCIONES RECOMENDADAS	RESPONSABLE
Recepción de reactivos	Daño en la integridad de los reactivos Temperatura inadecuada Acomodación en posición vertical	Afecta desempeño del reactivo	Inadecuado embalaje de los reactivos la transportadora no cumple con el adecuado manejo de las cajas. Demora en la entrega de pedidos.	Realizar adecuado embalaje de los reactivos. Marcar las cajas con flechas que indiquen posición vertical y contenido. Realizar recomendaciones a la transportadora sobre manejo de la mercancía y cadena de frío. Realizar lista de chequeo cuando se reciben reactivos.	Logística de casa comercial Transportadora Bacteriólogos encargados de la recepción en el laboratorio
Almacenamiento	Condiciones de temperatura y humedad inadecuadas	Afecta desempeño del reactivo	Inadecuada calibración de termohigrómetros.	Cumplir con el cronograma de mantenimiento y calibración de los equipos.	Director de Calidad Bacteriólogos y auxiliares

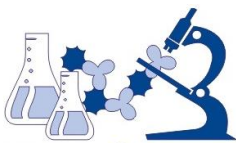
 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS		Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		VERSIÓN: 09
			FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

	Equipos de refrigeración fuera de rangos		Falta de mantenimiento de los equipos de refrigeración	Realizar revisión continua de temperatura y humedad.	Encargado de mantenimiento
Desempeño de los reactivos	Alteraciones en los valores del control de calidad y resultados de las muestras	Afecta los resultados de las pruebas realizadas dando falsos positivos o falsos negativos	Inadecuado almacenamiento y Distribución y transporte inadecuado Falla en los equipos que realizan las pruebas No seguir el protocolo de manejo de reactivos establecido en cada prueba	Almacenar reactivos siguiendo recomendaciones de casa comercial para condiciones de temperatura y humedad. Transportar adecuadamente los reactivos evitando golpes, cambio de posición, demora en entrega, entre otros. Realizar mantenimiento de los equipos. Capacitación permanente del personal.	Bacteriólogos y Auxiliares que realicen almacenamiento de reactivos Transportadora Encargado de mantenimiento
Control de Calidad	Ausencia de control interno Ausencia de análisis del control interno	Afecta los resultados de las pruebas	Falta de competencia técnica del personal profesional	Capacitar al personal profesional encargado del manejo de los reactivos	Director Coordinador de calidad Bacteriólogos
Resultados	Inadecuada interpretación Transmisión errada de los resultados	Afecta la calidad de los resultados Afecta la seguridad	Falta de competencia técnica del personal profesional Falta de revisión y auditoria de los procesos	Capacitar al personal profesional Realizar transmisión de resultados sistema de información del laboratorio Realizar auditoria continua de los procesos	Director Coordinador de calidad Bacteriólogos

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO		Código: PS.MR-07
	PRESTACION DE SERVICIOS		VERSIÓN: 09
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA		FECHA: junio 2025
			Página: 1 de 45

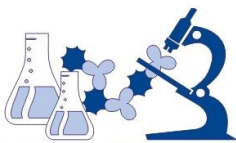
		de los pacientes			
Segregación de residuos	Manejo inadecuado de residuos	Afectación al medio ambiente Riesgo biológico	Falta de inactivación de los residuos Inadecuada segregación	Capacitar al personal sobre manejo de residuos	Director Coordinador de calidad Bacteriólogos y Auxiliares

COPIA CONTROLADA

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

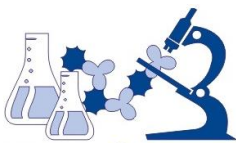
18. BIBLIOGRAFIA

- Programa Nacional de Tecnovigilancia. INVIMA. 2008
- Resolución 004816 de 2008
- Decreto 4725 de 2005
- A guide for the development of medical device regulation. 2002 Essential Drugs and Technology Program. Division of Health System and Services Development, Pan American Health Organization, World Health Organization. 2002.
- Grupo 1. Global Harmonization Task Force. Clasificación de los dispositivos médicos 10 de enero de 2001.
- Lineamientos para el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia. Documento Marco. INVIMA, Subdirección de Insumos para la Salud y Productos Varios .2005.
- Resolución 434 de 2001, Ministerio De Salud, Republica de Colombia.
- Grupo 2. Global Harmonization Task Force. Comparación de los sistemas de reporte de incidentes adversos en Estados Unidos, Europa, Canadá Y Japón. 2002.
- Cheng Michel, Essential Drug and Technology Program, Division of Health System and Services Development. Pan American Health Organization. World Health Organization.
- European Commission. Guidelines on a Medical Device Vigilance System. April 200.
- Grupo 2. Global Harmonization Task Force. Reporte a la autoridad competente del dispositivo médico. 2002.
- Grupo 2. Global Harmonization Task Force. Mínima cantidad de información para los reportes de fabricante a las autoridades competentes. Junio 29, 1999.
- Ley 100 de 1993.
- Decreto 3770 de 12 de noviembre de 2004. Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano.
- Resolución 132 de 23 de enero de 2006. Por la cual se adopta el manual de condiciones de almacenamiento y/o acondicionamiento para reactivos de diagnóstico in vitro.
- Resolución 1229 de 23 de abril de 2013. Por la cual se establece el modelo, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano.
- Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 2013038979 de 26 de diciembre de 2013. Por la cual se implementa el Programa Nacional de Reactivovigilancia.
- Abc de Reactivovigilancia. 2014. INVIMA.
- Curso INVIMA REACTIVO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2024

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

9. REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA
01	Entrada en vigencia	Calidad	Mayo 2014
02	Actualización	Calidad	Agosto 2014
03	Actualización	Calidad	Marzo 2015
04	Actualización	Calidad	Marzo 2016
05	Actualización aplicativo online	Calidad	Marzo 2018
05	Revisión	Calidad	Enero 2019
05	Revisión	Calidad	Enero 2020
05	Revisión	Calidad	Enero 2021
05	Revisión	Calidad	Enero 2022
05	Revisión	Calidad	Enero 2023
06	Revisión	Calidad	Enero 2024
07	Actualización links certificados de seguridad	Calidad	Abril 2024
08	Actualización fichas Invima	Calidad	Septiembre 2024
09	Actualización fechas de vencimiento	Calidad	Junio 2025

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS	Código: PS.MR-07
	MANUAL DE REACTIVO VIGILANCIA	VERSIÓN: 09
		FECHA: junio 2025
		Página: 1 de 45

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO
Firma: 	Firma: 	 Firma:
Cargo: Coordinadora de calidad	Cargo: Coordinadora de Calidad	Cargo: Director Laboratorio
Fecha: junio 2025	Fecha: junio 2025	Fecha: junio 2025

COPIA CONTROLADA